


L.TEX 機器組み込み用-Nシリーズ

機器組み込み用高圧プランジャーポンプ



9830N/9810N 型

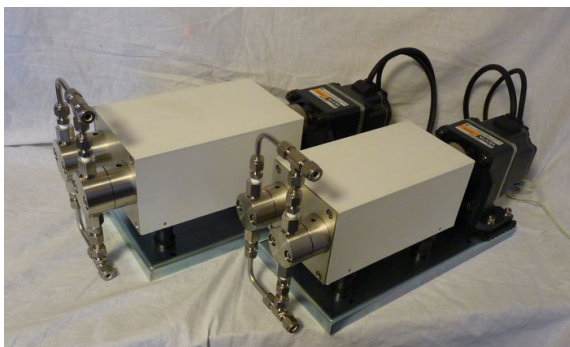

9850N 型

お客様から高い評価を頂いている汎用高圧プランジャーポンプの機器組み込み用モデルです。専用のモータードライバーをお客様の装置に組み込み、電圧制御での流量コントロールが可能となります。

最大流量 10ml/min の 9803N 型から 1000ml/min の 9850N 型までお客様のご要望により多彩な機種からの選定が可能です。

更に脈動を可能な限り抑えたいお客様には吸入側・吐出側共理論脈動率 7% の 3ヘッド型 9100N シリーズもご用意できます。

9800 シリーズ同様、ヘッド冷却ジャケットの追加により超臨界流体の送液にも対応可能ですし、この場合の高圧ガスの認定も可能です。また固形物が混在するスラリー液や高粘度溶媒の送液も専用ヘッド（オプション）の交換することで送液が可能です。

さらに防爆が必要な場合にも d2G4 規格の防爆モーターが選定可能な応用範囲の広い汎用ポンプです。（この場合防爆仕様のモーターとなりますので、仕様によっては装置の大きさが変わる可能性があります。）

また全ての仕様に関して高圧ガスの受験が可能ですので、お申し付けください。

型式	流量範囲	最大使用圧力	電源
9803N	0.2~ 10.0ml/min	40MPa	AC100V 3A
9810N	0.4~ 20.0ml/min	40MPa	AC100V 3A
9820N	0.5~ 30.0ml/min	35MPa	AC100V 4A
9822N	0.5~ 50.0ml/min	35MPa	AC100V 4A
9830N	1.2~ 100.0ml/min	35MPa	AC100V 6A
9831N	2.0~ 150.0ml/min	35MPa	AC100V 6A
9840N	2.5~ 200.0ml/min	25MPa	AC100V 6A
9842N	5.0~ 300.0ml/min	25MPa	AC100V 6A
9843N	10.0~ 500.0ml/min	20MPa	AC100V 6A
9850N	10.0~1000.0ml/min	10MPa	AC100V 10A



9121N 型

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台 1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》