


L.TEX 8523 型

自動切換バルブ付き高圧シリンジポンプ

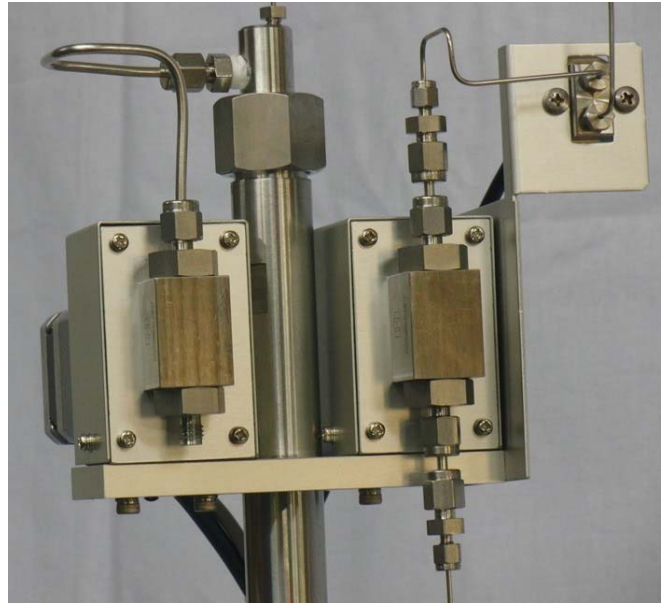

自動切換バルブ部分

エルテックスのシリンジポンプはお客様のご使用条件に可能な限り対応するためにカスタムメイドを基本としています。

8523型は流量設定範囲が低流量域に偏っているため、分解能を向上させるため細く長いシリンダーを使用しています。またシリンダーへの溶媒の吸入／吐出を自動的に行うためモータードライブの高圧バルブを装備しています。これによりシリンダー内部の溶媒を全量排出時にはバルブが自動的に切り替わり、溶媒の吸入工程に移ります。

L.TEX 8523 型高圧シリンジポンプ仕様

送液形式	ボールネジによるシリンジ駆動形式
最大使用圧力	20MPa
設定流量範囲	0.5~500 μ l/min
シリンダー容量	30ml
接液部材質	SUS316、PEEK、高密度ポリエチレン、フッ素樹脂
主な機能	定流量／定圧送液機能、タイムプログラム（ステップワイズ）、上下限圧カリミッター ポンプオフタイマー、流路自動切換バルブ、攪拌用強電磁スターラー付き
流路切換バルブ	自動切換バルブ
外部コントロール	外部START/STOP、RS232C
大きさ／重量	210(W) X 682(H) X 350(D) 約12kg

注) 本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

製造・販売 有限会社 エルテックス

〒192-0371

東京都八王子市南陽台1-21-12

TEL 042-689-6824

FAX 042-689-6844

《関連特注機器の設計・製造も承ります》